


Носовая маска Ultra Mirage™ II

универсальность рабочих параметров

Носовая маска Ultra Mirage™ II компании «ResMed» может использоваться большинством пациентов, проходящих курс лечения положительным давлением в дыхательных путях и пользующихся аппаратами СИПАП, двухуровневой вентиляцией или приборами AutoSet компании «ResMed».


Ultra Mirage II производится с четырьмя различными размерами уплотнителя (стандартный, большой, мелкий, мелко-широкий) и подойдёт для большинства пациентов с первой примерки и до окончания курса терапии.

Маска Ultra Mirage II продолжает оставаться стандартом качества носовых масок с точки зрения герметичности, удобства и снижения шума, что немаловажно для эффективного проведения терапии. Ее конструкция основана на надежной технологии двухслойного уплотнителя Mirage компании «ResMed» и использует уникальный воздуховод для снижения уровня шума.

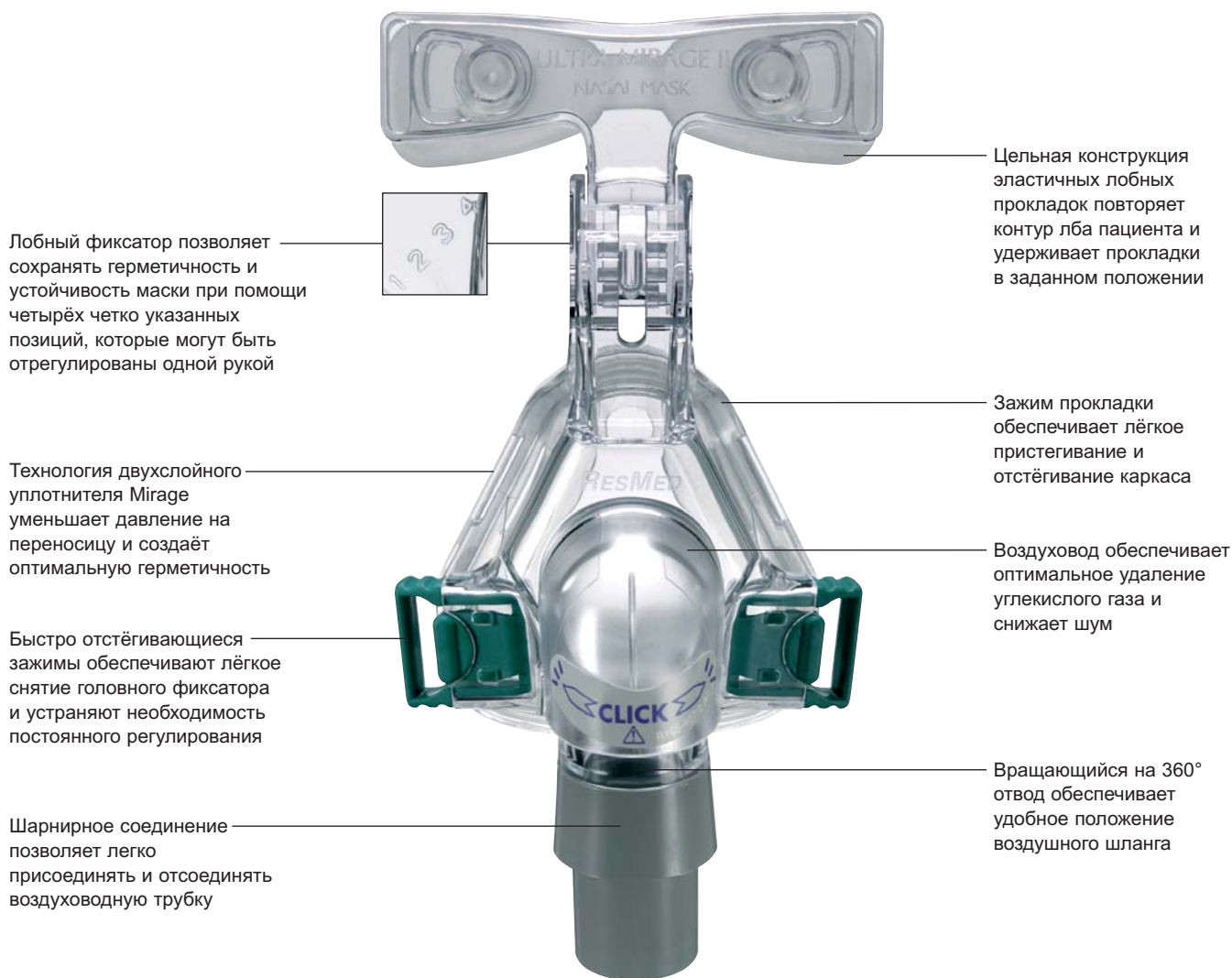

СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО: УНИКАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОД

- Уникальный дизайн воздуховода снижает интенсивность подачи воздуха и уровень шума
- Воздух удаляется по воздушной трубке и не беспокоит ни пациента, ни спящего рядом человека.
- Устройство воздуховода обеспечивает подачу достаточного количества воздуха для удаления углекислого газа.

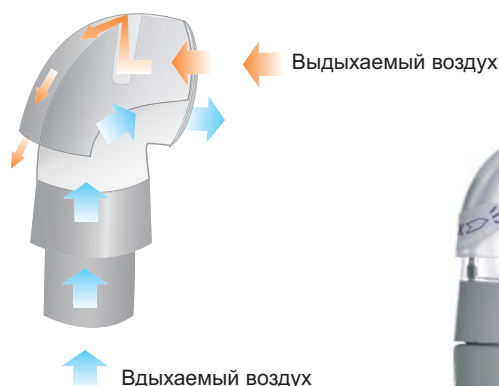

Регулируемый лобный фиксатор

- Облегчает процесс лечения (особенно для пациентов, требующих прохождения курса под более высоким давлением или с использованием двухуровневой вентиляции).
- Даёт возможность выбрать одну из четырёх позиций крепления, что повышает герметичность и устойчивость.

Шарнирное соединение

- Позволяет легко присоединить и отсоединить воздушный шланг без снятия маски.
- Позволяет пациентам свободно двигаться.

Вращающийся отвод

- Вращающийся на 360° отвод даёт пациентам возможность выбрать удобное положение для воздушного шланга.

Прочный и удобный головной фиксатор

- Отстегивающиеся зажимы головного фиксатора обеспечивают его быстрое и удобное снятие: после начальной примерки нет необходимости в дополнительной подгонке маски.
- Четыре точки крепления к каркасу маски повышают устойчивость.

Быстрая примерка

- Маска поставляется полностью собранной в комплекте с головным фиксатором.
- Все, что необходимо при первой примерке маски, это установка лобного и головного фиксаторов.



Регулируемый лобный упор: четыре четко обозначенные положения



Вращающийся отвод: удобное положение воздушного шланга Компания

НОСОВЫЕ МАСКИ СИСТЕМЫ ULTRA MIRAGE II

Коды продуктов

Северная и Латинская Америка

Стандартная	16548
Большая	16549
Мелкая	16550
Мелко-широкая	16577

Великобритания

Стандартная	16321
Большая	16322
Мелкая	16323
Мелко-широкая	16324

Европа (кроме Великобритании) и Азия

Стандартная	16545
Большая	16546
Мелкая	16547
Мелко-широкая	16578

Австралия и Новая Зеландия

Стандартная	16579
Большая	16580
Мелкая	16581
Мелко-широкая	16582