

Q — тишина и покой.



### НАЗАЛЬНАЯ МАСКА F&P ZEST Q

Преимущества назальных масок F&P Zest Q: облегченные, обеспечивают более плотное прилегание вокруг носа и, как всегда, удобны в использовании.

**Одна из их отличительных особенностей — бесшумная работа.**

Назальные маски F&P Zest Q, выпускаемые в трех различных размерах, поставляются в уже собранном виде, готовом к применению.



 Выпускается  
в 3 размерах



Удобство



Герметичность



Простота

Простые решения с масками Zest. Маска F&P Zest Q минимизирует воздействие на партнера и обеспечивает более здоровый сон. В маске F&P Zest Q применяются все испытанные наработки компании Fisher & Paykel Healthcare, а усовершенствованный рассеиватель воздуха обеспечивает еще более низкий уровень шума.




## Комплект поставки

- Маска в сборе с головным креплением, готовая к использованию
- Три размера: миниатюрный, стандартный, большой
- Наглядное руководство по надеванию маски

## Код для заказа

- |        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 400444 | F&P Zest Q Petite (миниатюрный) |
| 400445 | F&P Zest Q (стандартный)        |
| 400446 | F&P Zest Q Plus (большой)       |

Маска подходит для пациентов с обычными размерами головы\*

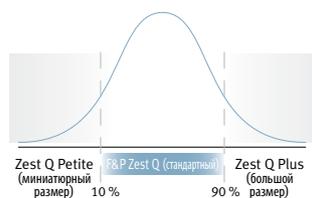

\*Согласно базе антропометрических данных, собранных компанией Fisher & Paykel Healthcare.





**1. Усовершенствованный рассеиватель воздуха**

**Тихий в использовании.** Усовершенствованная конструкция рассеивателя воздуха обеспечивает минимальный уровень шума и эффективное рассеивание выдыхаемого воздуха. Можно применять с крышкой, обеспечивающей дополнительное подавление шума, или без нее (при этом рассеиватель не требует ухода).





**2. Силиконовый уплотнитель с простой фиксацией и VTS™**

**Высокая производительность.** Простая фиксация силиконовой прокладки позволяет быстро и легко ее подсоединить или отсоединить для чистки. Функция изменяющейся толщины силиконового слоя (VTS), придающая особую мягкость при подгонке по овалу лица, обеспечивает повышенную герметичность и комфорт.





**3. Вспененная прослойка FlexiFoam™**

**Автоматическая подгонка прослойки под форму лица.** Вспененная прослойка FlexiFoam позволяет добиться более высокого уровня комфорта благодаря уникальному дизайну легкого, мягкого, обеспечивающего хорошую поддержку пористого материала.






**4. Технология FlexiFit™**

**Автоматическая подгонка под форму лица.** Вспененная прослойка, в которой применяется технология FlexiFit, позволяет одним движением, без сложных манипуляций, автоматически подгонять маску под различные формы носа и овалы лица.



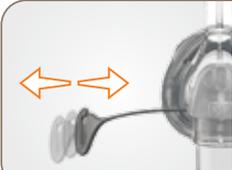

**5. Ремешок Glider™**

**Предотвращение утечки воздуха.** Скользящий ремешок Glider обеспечивает плотное прилегание маски, не ограничивая свободу движений. Плотность прилегания маски при поворотах головы остается неизменной, что позволяет минимизировать утечку воздуха.






**6. Головное крепление Stretchgear™**

**Усовершенствованная система крепления.** Удобное, не стесняющее дыхание эластичное головное крепление, сконструированное для поддержания хорошей герметизации.



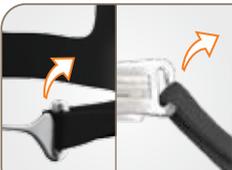

**7. Защелка Glider/Скрытый фиксатор ремешка**

**Снятие одним движением.** Простое снятие головного крепления одним движением благодаря защелке Glider или скрытому фиксатору ремешка. Позволяет быстро вновь собрать маску без сложной подгонки.



[www.fphcare.com](http://www.fphcare.com)