

HURRICANE

MEYRA[®]
ACTIVE

*Das Präzisionsgerät
für Sport und Alltag*

*The precision tool for
sport and everyday life*





Die Hurricane-Technologie überzeugt weltweit in ihrer Einzigartigkeit. Die Kombination aus Hightech, Wissen und Präzision macht den Hurricane zum absoluten Unikat. Hurricane ist und bleibt ein Präzisionsgerät für Sport und Alltag. Die Anpassung erfolgt präzise auf den Millimeter genau. Jeder Hurricane-Rahmen wird mittels CAD-Daten vorab konfiguriert und dann mit Toleranzen, die kleiner als ein menschliches Haar sind, per Laser zugeschnitten und zu einer dauerfesten Einheit verschweißt.

Unser Ziel: die besten Rollstühle für Sport und Alltag zu bauen.

Across the globe, Hurricane technology is impressive in its uniqueness. Combining high-tech features, knowledge and precision, the Hurricane is absolutely unique. Hurricane is and remains a precision tool for sport and everyday life. It can be adjusted precisely down to the last millimetre. Every Hurricane frame is preconfigured using CAD data and then customised by laser with tolerances as minute as a human hair. The result: an incredibly durable welded unit.

Our aim: to construct the best wheelchairs for sport and everyday life.

Weltweit einmalig. Langlebigkeit und perfekte Fahrperformance

*Unprecedented worldwide.
Durability and perfect
performance.*

**Hurricane – das Original.
Nur von MEYRA. Made in
Germany**

Unsere langjährige Erfahrung garantiert Qualität auf höchstem Niveau. Gewichtersparnis durch hochfeste Aluminiumlegierung und Wandstärkenoptimierung, basierend auf Spannungsanalysen. Steigerung der Dauerfestigkeit durch einen speziellen Warmauslagerungsprozess. Perfektes Fahrverhalten. Hurricane-Technologie steht für Langlebigkeit und perfekte Fahrperformance.

**Hurricane – the original.
Only from MEYRA. Made
in Germany**

Our many years of experience guarantee the highest level of quality. Lightweight thanks to a highly stable aluminium alloy and wall thickness optimised on the basis of stress analyses. Fatigue strength enhanced through a special artificial ageing process. Perfect handling. Hurricane technology stands for durability and perfect performance.

HURRICANE
S



HURRICANE
SPORT



HURRICANE
EVERYDAY



HURRICANE
PRO





**Das Präzisionsgerät
für den Alltag
mit offenem S-Rahmen**

*The precision tool for everyday use
with open S frame*



Seitenteile

Die Seitenteile sind individuell an die Sitzposition angepasst.

Side guards

The side guards can be adjusted individually to the seat position.

Das Präzisionsgerät für den Alltag – custom-made – mit offenem S-Rahmen-Konzept. Echt innovativ. Mit klarer Rahmenform, minimalistisch aufgebaut, bietet der Hurricane S alle Vorteile vom Hurricane Everyday und ist dabei noch leichter. Design, Individualität und ein optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht sind seine Stärken. Rahmen fest verschweißt und perfektes Fahrwerk. In ihm steckt das Know-how der Hurricane-Technology.

The custom-made precision tool for everyday use – with open S frame. Truly innovative. With its uncluttered, minimalist frame design, the Hurricane S offers all of the advantages of a Hurricane Everyday, but with a lower weight. Its strengths: design, individuality and a perfect balance between stability and weight. Solidly welded frame and perfect chassis. Backed with the know-how of Hurricane technology.





Lenkgabel

Die Lenkgabel ist aus einem Stück gefertigt, absolut stabil, mit optimalen Lenkeigenschaften. Lenkradgrößen von 80, 72 und 55 mm sind je nach Einsatz und Nutzung wählbar.

Castor fork

The castor fork is fashioned from a single piece, making it absolutely stable with excellent steering properties. Castor wheel available in 80 mm, 72 mm and 55 mm depending on purpose and frequency of use.



Seitenteile

Die Seitenteile sind individuell gefertigt und fest verschweißt.

Side guards

The side guards are produced individually and are solidly welded on.



Hurricane – das Original.
Hält, was es verspricht
Hurricane – the original.
Delivers on its promises



Perfekte Dynamik, Höchstgeschwindigkeit und absoluten Kampfgeist finden Sie beim Hurricane Sport. Egal ob Basketball, Rugby, Tennis oder Dance. Absolute Präzision trifft auf ultimative Perfektion.

Der Sportrollstuhl wird an die speziellen Anforderungen des Sports, des Spielers und der Spielposition angepasst.

You will find perfect dynamics, maximum speed and outstanding fighting spirit with the Hurricane Sport, whether you need it for basketball, rugby, tennis or dance. Absolute precision meets ultimate perfection.

The sport wheelchair can be adapted to the special requirements of the sport, the athlete and the playing position.



**Der ideale Partner
für jeden Tag**

The ideal partner for everyday life.

Das Präzisionsgerät für den Alltag.
Leicht – stabil – spurtreu – langlebig.

Der starre Rahmen lässt keine Kompromisse zu.
Das fest verschweißte Fahrwerk reagiert sofort auf die Antriebskraft des Nutzers.

The precision tool for day-to-day use. Light – stable – always on track – durable.

The rigid frame leaves no room for compromise.
The solidly welded chassis responds instantly to the user's power.





HURRICANE PRO 10/11



Seitenteile

Die Seitenteile sind fest verschraubt.

Side guards

The side guards are firmly fastened with screws.



Fußplatte

Die Fußplatte kann individuell verstellt werden.

Footrest

The footrest can be adjusted individually.



Stützrollen

Die doppelten Stützrollen sind serienmäßig und fest mit dem Rahmen verschweißt.

Anti-tip wheels

The two anti-tip wheels are standard and are welded solidly to the frame.



Achse

Das verstellbare Oversize-Achsrohr ermöglicht die ideale Schwerpunkteinstellung.

Axle

The adjustable oversize axle tube allows for ideal adjustment for centre of gravity.




Das Einsteigermodell für Sportler

The beginner model for athletes

Der vollausgestattete Basketball-Sportrollstuhl aus Aluminium mit verstellbarem Oversize-Achsrohr für den optimalen Einstieg. Auch hier steht die Hurricane-Technologie im Vordergrund. Minimales Gewicht bei absoluter Stabilität.

The fully equipped aluminium sport wheelchair for basketball with adjustable oversize axle tube is ideal for beginners. Here too, the Hurricane technology takes priority. Minimal weight with absolute stability.



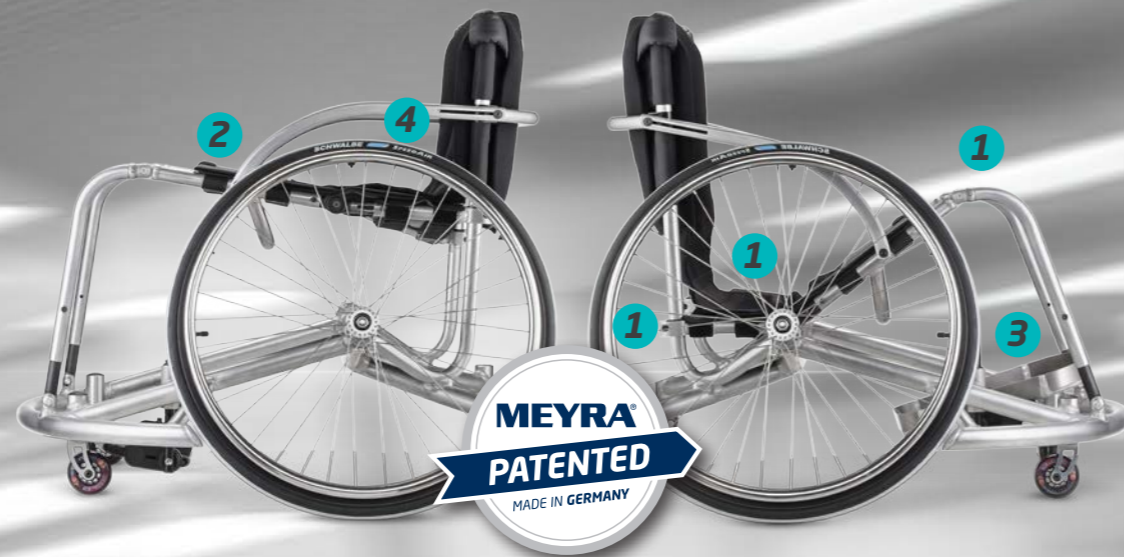

1 Sitzhöhe

Vordere, hintere und mittlere Sitzhöhe stufenlos einstellbar

Seat height

Front, rear and midway seat height can be adjusted progressively

3 Fußplatte

Stufenlose Einstellbarkeit der Unterschenkellänge und Fußposition

Footrest

Can be adjusted progressively for lower calf length and foot position

2 Sitztiefe

Variable Sitztiefeinstellung

Seat depth

Variable setting for seat depth

4 Schwerpunkt

Schwerpunktverstellung über Module

Centre of gravity

Centre of gravity adjustable via modules

**Perfekte Anpassung.
Jeder Millimeter
passt genau**

*Perfectly adjustable.
A precise fit down to the last millimetre.*

Realisierung der besten Anpassung. Jeder Millimeter Qualität pur – das ist unser erklärtes Ziel. Der Hurricane Assist zeigt sofort das 100%ige Ergebnis. Anpassen, sofort testen und entscheiden. Made by MEYRA.

How to achieve the best adjustment. Quality in every millimetre – that is our avowed goal. Hurricane Assist shows the maximum result instantly. Adjust, test immediately and decide. Made by MEYRA.





**„Schnell. Wendig. Robust.
Immer unter Kontrolle.
Perfekt für mich!“**

Leon-Ole Schöneberg

**“Fast. Agile. Robust.
Always in my control.
Perfect for me!”**

Leon-Ole Schöneberg

**Leon-Ole, geb.
24.12.1996
Rollstuhlbasketballer
seit seinem 10. Lebens-
jahr.**

Verein:
SGK Rolling Chocolate

**Sportliche Erfolge mit
dem Hurricane:**
Juniorennationalspieler
Europameister 2012
Weltmeister 2013

Von Profis – für Profis.
Der ständige Austausch mit
den Rollstuhlsportlern hilft
uns dabei, unsere Produkte
perfekt auf die individuellen
Ansprüche abzustimmen
und stetig zu verbessern.

Vielen Dank, Leon-Ole, für
die tolle und konstruktive
Zusammenarbeit!

**Leon-Ole, born
24.12.1996
Wheelchair basketball
player since the age of
10.**

Club:
SGK Rolling Chocolate


**Athletic achievements
with the Hurricane:**
Junior international
2012 European champion
2013 World champion



Made by pros – for pros.
Constant consultation with
wheelchair athletes helps
us to gear our products
perfectly to individual re-
quirements and to improve
constantly.


Thank you, Leon-Ole, for
your excellent and con-
structive contribution!



MEYRA GmbH

 Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 Tel.: +49 5733 922-311
 Fax: +49 5733 922-9311

 info@meyra.de

www.meyra.de

MEYRA 08.14 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make technical modifications to our products as well as typographical errors and colour deviations in our printed material.

Ident-Nr. 261507900

by b+w-c.de

MEYRA[®]
ACTIVE