

Мебель бытовая для сидения:
Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

Стул

Производитель: Foshan Nanhai KJT
Rehabilitation Equipment Co., LTD (Китай)
Поставщик: ООО «Мега-Трейд» (Россия)
Модель: **KJT509A**



Основные технические характеристики:

Диаметр сиденья – 320 мм
Высота сиденья – 380-530 мм
Допустимая нагрузка до 100 кг
Вес – 1.2 кг

Комплект поставки:

1. Стул – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Инструкция по сборке – 1 шт.

Стул предназначен для установки в ванные комнаты или душевые. Ножки выполнены из анодированного алюминия и не подвергаются коррозии. Резиновые наконечники на всех 4-х ножках препятствуют скольжению, не оставляют следов на поверхности. Сиденье выполнено из высокопрочного полиэтилена. Высота сиденья регулируется кнопочным фиксатором с шагом 2,5 см.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей не ухудшающие качество изделия без предварительного уведомления.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными элементами, воздействию прямых солнечных лучей.
2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.

Транспортировка и хранение

Изделие транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Транспортировка и хранение изделия без упаковки завода-изготовителя не гарантирует его сохранность. Упакованное изделие должно храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности. В условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие прямых солнечных лучей. Утилизация изделия осуществляется отдельно по группам материалов согласно нормативной документации.

Список предприятий занимающихся утилизацией отходов можно получить в органах местного самоуправления или в компетентных органах исполнительной власти.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.НА74.В.00663/20,
срок действия с 10.09.2020г. по 09.09.2025г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления: 31 марта 2021 г.

Поставщик: ООО «Мега-Трейд» (Россия)

Контактный телефон: (495) 777-36-00

143396, г. Москва, п. Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3, офис 2/2

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию.


Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

КЈТ509А

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ДЛЯ СБОРКИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ОТВЕРТКА.

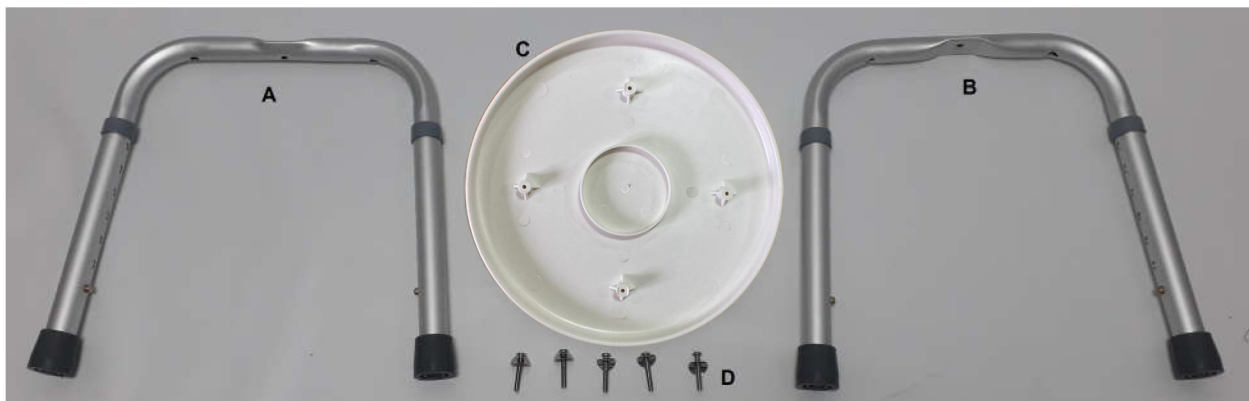

1. УСТАНОВИТЕ НОЖКИ (В) НА СИДЕНЬЕ (С), И ЗАФИКСИРУЙТЕ ПО КРАЯМ 4 ШУРУПАМИ И 1 ВИНТОМ С ШАЙБАМИ (D), КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



2. ЗАТЕМ УСТАНОВИТЕ НОЖКИ (А), И ЗАФИКСИРУЙТЕ ПО КРАЯМ И ПО ЦЕНТРУ БОЛТАМИ С ШАЙБАМИ (D), КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "МЕГА-ТРЕЙД"

Место нахождения: 143396, Россия, город Москва, Первомайское поселение, хутор Ильичевка, строение 3, офис 2/2, Основной государственный регистрационный номер 1157746865100

Телефон: +74957773600 Адрес электронной почты: mosmegatrade@gmail.com

в лице генерального директора Головина Андрея Владимировича

заявляет, что Мебель бытовая (кроме детской) для сидения: стулья, модели: KJT501, KJT502, KJT503, KJT503A, KJT503B, KJT504, KJT504S, KJT505, KJT506, KJT507A, KJT507B, KJT508, KJT509A, KJT509B, KJT510, KJT511, KJT511A, KJT511B, KJT507, KJT508A, KJT505A

Изготовитель "Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., LTD."

Место нахождения: Китай, 528204, Qixing Precinct, Xiqiao town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9401790009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 678-12455-2020 от 19.08.2020 Испытательной лаборатории промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном", аттестат аккредитации RA.RU.21DM80

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012. "О безопасности мебельной продукции".

Гарантийный срок эксплуатации и срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.09.2025 включительно.

(подпись)

М.П.

«Мега-Трейд»
«Mega-Trade» LLC

Головин Андрей Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.НА74.B.00663/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.09.2020